

ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОЦЕСС

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ



HT2800T

Многофункциональный
автосамплер
для газовых
хроматографов



Универсальная модель «All-in-one»,
объединяющая функционалы
жидкостного и парофазного
автосамплеров. Может быть
установлен на ГХ, ГХ/МС любого
производителя





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система очистки	Продувка инертным газом
Вместительность лотка (жидкие пробы)	121 виала
Вместительность лотка (парофазные пробы)	42 виалы
Объем шприца (жидкость)	0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 100 мл
Объем шприца (паровая фаза)	2.5 мл
Скорость отбора парофазной пробы	0.1 - 100 мл/мин
Скорость ввода жидкой пробы	1 - 100 мкл/сек
Время перехода между режимами	до 5 минут
Безопасность	Функция проверки целостности систем и герметичности виал Идентификация шприцов и предотвращение ошибки при их установке при помощи инновационной системы Syringed

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Система All-in-one: объединяет функционал жидкостного и парофазного автосамплеров
- ✓ Возможность ввода пробы последовательно в два испарителя.
- ✓ Быстрый переход между режимами
- ✓ Большая вместительность лотка: 121 виала для жидких и 42 виалы для парофазных проб
- ✓ Функции проверки целостности систем и герметичности виал
- ✓ Возможность ручной настройки автоматического дозатора под конкретный хроматограф
- ✓ Работа с газовым хроматографом любого производителя

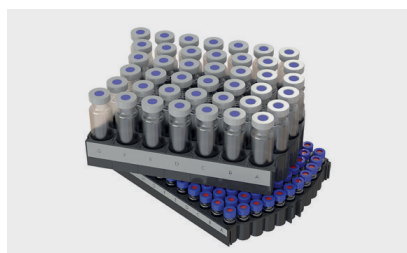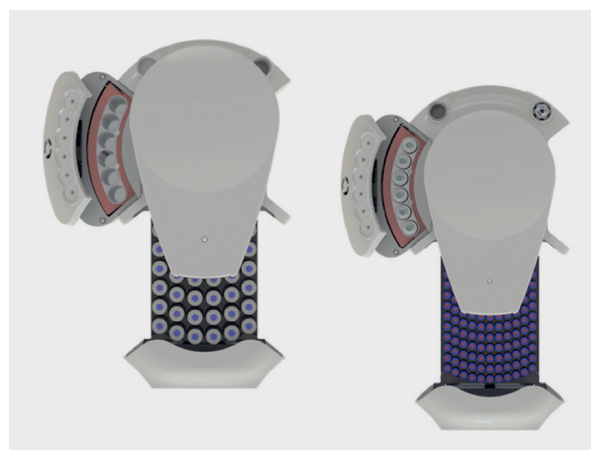

Многофункциональный автосамплер сочетает в себе технические характеристики и функции автосамплеров для ввода проб различного агрегатного состояния: жидких проб, проб равновесного пара и SPME (твердофазная микроэкстракция). Переход из одного режима в другой занимает до пяти минут и заключается в замене дозирующего шприца и лотка с пробами.

КОНТАКТЫ

Офис: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11 корп. В
Тел.: +7 (495) 291-39-19, E-mail: sales@gluvex.com
gluvexlab.com



Новые поступления на склад,
интересные статьи, сервисные
обзоры смотрите в Telegram